

NEXOPART UWL 400 T


Pour tamisage à sec

Système de serrage
Classic, en option avec
le système de serrage
rapide NEXOPART TwinNut

Poids de colonne de
tamis max. : 50 kg

Diamètres de tamis
jusqu'à 400 mm*

Appareil de
commande
séparé

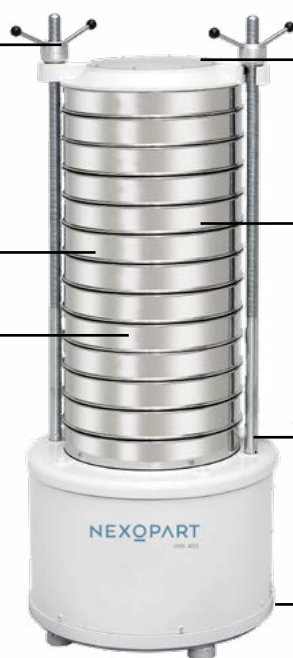

Couvercle pour tamisage
à sec avec verre-regard

Spécifications de tamis
inscrites au laser

Deux moteurs triphasés à
balourds

Plaque de base en acier
moulé robuste et habillage
en tôle de haute qualité

ENTRAÎNEMENT/COMMANDE

- Deux moteurs triphasés
- Mouvement de tamisage tridimensionnel commandé par force
- Appareil de commande séparé, à fixation murale
- 1.500 impulsions par minute (25 hertz env.)
- Instrument de mesure étalonné selon ISO 9001

BOÎTIER

- Plaque de base en fonte d'acier robuste
- Revêtement en tôle de haute qualité
- Plateau oscillant en fonte d'aluminium

DESIGN

- Forme robuste et solide

UTILISATION

- Plug and Play

CERTIFICATS

- Certificat de réception 3.1 selon DIN EN 10 204 payant
- Documentation IQ/OQ payant

NEXOPART UWL 400 T:

La tamiseuse de laboratoire 3D pour les matières en vrac jusqu'à 20 kg.

NEXOPART

simplicity for your lab

TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN QUELQUE MOTS.

	UWL 400 T und H	UWL 400 N
Procédé d'analyse	Tamissage	Tamissage
Plage de mesure	20 µm – 125 mm	20 µm – 125 mm
Charge maxi du produit à tamiser	20 kg env.	20 kg env.
Poids maxi du jeu de tamis	max. 50 kg	max. 50 kg
Diamètre de tamis	200 mm – 400 mm* (T) 300 mm x 300 mm, 500 mm x 500 mm (H)	200 mm – 400 mm*
Nombre maxi de tamis	13 (400 x 65 mm)	13 (400 x 65 mm)
Tamissage à sec	oui	oui
Tamissage à humide	non	oui
Tension du réseau	200 – 240 V, 50 – 60 Hz	200 – 240 V, 50 – 60 Hz
Programmateurs	0–599 minutes / Mode continu	0–599 minutes / Mode continu
Mode	continu	continu
Moyen de contrôle étalonnable selon	oui, ISO 9001	oui, ISO 9001
Interface	non	non
Dimension L x P x H	600 x 600 x 1420 mm	600 x 600 x 1420 mm
Poids	190 kg, net	190 kg, net
Coleur	RAL 9003, blanc de sécurité	RAL 9003, blanc de sécurité
Référence	205323102 T (Classic) 205322846 T (NEXOPART TwinNut) 205323133 H (Système de tension pour tamis en bois)	205323140 (Classic) 205322853 (NEXOPART TwinNut)

* Vous pouvez également utiliser des tamis de 450 mm, dans ce cas, vous devez commander un dispositif de fixation (206515841) en plus.

NEXOPART GmbH & Co. KG

A Haver & Boecker and Hosokawa Alpine Company

Ennigerloher Str. 64
59302 Oelde
Germany

sales@nexopart.com

www.nexopart.com

DB 45 F 01 032025 UWL 400 T PDF NEXOPART®.

Toute reproduction, même partielle, est soumise à autorisation.
En tant qu'entreprise innovante, Nexopart® protège sa propriété intellectuelle. Le savoir-faire NEXOPART® est protégé par les droits de propriété intellectuelle suivants : Marque verbale NEXOPART® dans l'espace de protection DE (30 2022 110 345), IR UK (WO0000001740397), IR EU (1740397) et IR US (7,525,699). W.S. TYLER® et RO-TAP® sont des marques commerciales et des marques déposées de Haver Tyler Corporation. Les photos : Walkenhorst

